


WatchPAT™ ONE

Пошаговое руководство

Упаковка WatchPAT™ ONE содержит:

1. Пошаговое руководство
2. Устройство WatchPAT™ ONE с датчиком на палец (1) и грудным датчиком (2)*
3. Батарейки AAA (3)

*Грудной датчик не входит в комплект WatchPAT™ ONE E

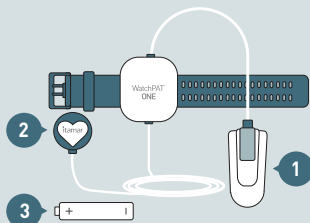

Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции перед установкой WatchPAT ONE

Загрузите приложение WatchPAT ONE на ваш смартфон (доступно в Apple App или Google Play Store).

Заметка: Убедитесь, что у вас имеется четырехзначный ПИН-код для активации устройства.

- Снимите стесняющую одежду, кольца, часы и другие украшения.
- Удалите лак для ногтей и накладную ноготь с тестируемого пальца, коротко обрежьте ноготь.
- Устройство необходимо носить на недоминантной руке, пальчиковый датчик может быть установлен на любой палец, за исключением большого пальца.

Заметка: Помощь другого человека может потребоваться для установки устройства.

Управление устройством:

Подготовка к началу теста:

- Выключите все передающие устройства в комнате, такие как смарт-часы, другие смартфоны и наушники, которые могут нарушить проведение теста.
- Откройте приложение WatchPAT ONE на вашем телефоне.
- Следуйте инструкциям в приложении, которые проведут вас через этапы проведения теста.

Заметка: У вашего телефона должен быть доступ в Интернет, пока вы настраиваете устройство WatchPAT ONE для проведения теста.

В конце теста:

1. Нажмите кнопку **“Конец записи”** (END RECORDING) в приложении WatchPAT ONE и следуйте инструкциям.
2. Если приложение закрыто, откройте его, убедитесь, что ваш телефон имеет доступ в интернет, и подождите до появления уведомления **“Спасибо”** (Thank you).

Заметка: Тест закончен и послан вашему доктору только тогда, когда вы увидите сообщение **“Спасибо”** (Thank you) в приложении.

Обозначение технической информации



Для одноразового использования. Не использовать повторно



Температурный лимит от 0 °C до 40 °C



Смотри инструкцию по эксплуатации

1.5V DC

Рабочее напряжение батареи

IP22

Защита от проникновения



Рабочая часть типа BF

FCC ID
ZAPUBWPN0E

Идентификационный номер Федеральной комиссии связи



Производитель медицинского устройства



Каталожный номер



Серийный номер



Дата производства



Использовать до даты



Продукт отменен логотипом CE 2797 для BSI.

EC REP

Авторизованный представитель в Европейском сообществе



В соответствии с Директивой WEEE 2012/19 / EU, все отходы электрического и электронного оборудования (EEE) следует собирать отдельно, а не выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Пожалуйста, утилизируйте этот продукт и все его части ответственным и экологически чистым способом.



ХРУПКИЙ, ОБРАЩАТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:



ДЕРЖАТЬ СУХИМ:

Step by step video:



Важные заметки:

- Температура хранения и эксплуатации от 0 °C до 40 °C.
- Не пытайтесь подсоединить или отсоединить какие-либо части устройства.
- Не пытайтесь вставить инородные объекты внутрь устройства.
- Ни при каких условиях не пытайтесь устранить проблему самостоятельно.

REF: OM2192493 - Ed.1



Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598
Help Desk: +1-888-748-2627



Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

itamar
medical
www.itamar-medical.com